

Spiroclinic Pro



La Spirometria come non si era mai vista prima, la tecnologia ultrasonica per le patologie respiratorie.



Spirometria

Spirometro di MedEA è uno spirometro governato da App mobile che guida l'operatore ed il paziente durante l'esecuzione dell'esame, rendendo la misurazione semplice e riproducibile.

La Tecnologia di misurazione Ultrasonica del flusso lo rende estremamente preciso ed affidabile per un esame utile per lo screening e il monitoraggio delle principali patologie respiratorie.



Senza cavi



Filtro antibatterico



Taratura automatica



reddit winner 2020

Caratteristiche


Spirometria professionale guidata: l'App guida e supporta operatore e paziente durante l'esecuzione dell'esame che dura solo pochi minuti, garantendo semplicità ed affidabilità.

Misurazione ultrasonica del flusso Tecnologia ultrasonica senza ricalibrazioni assicura alta precisione anche per bassi livelli di flusso - ATS/ERS compliant.

Massima igiene: assicura la massima igiene, grazie al con il suo condotto dell'aria rimovibile e lavabile.

Basetta software integrata: la basetta smart misura la temperatura, l'umidità, la pressione e il livello zero del flusso dell'ambiente di prova.

Refertazione rapida: possibilità di ricevere il referto di uno specialista mediamente in 24 ore.

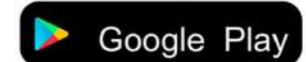

La Spirometria come non si era mai vista prima



1. **Apertura dell'App** ed inserimento dei dati anagrafici

2. **Applicazione** del filtro antibatterico ed antivirale

3. **Esecuzione** dell'esame seguendo i suggerimenti dell'App ed invio dei dati per la refertazione

4. **Ricezione** del referto specialistico dalla centrale di refertazione

